


# 如何使用Giona Easyhaler®




1. 将保护盖从Easyhaler®取出。
2. 手握Easyhaler®将吸入器上下摇晃三到五次。
3. 将Easyhaler®握在食指与拇指之间手并确保吸入器是直立的。

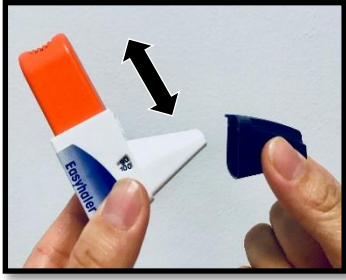

4. 用食指将吸入器用力往下按一次,直到“的”一声。
5. 可放开食指。一份剂量已释放出来。
6. 在吸入Easyhaler®之前,先呼出一口气。请别将气呼进吸入器内。




7. 将吸入器的尖端放于双唇之间,然后从嘴深深的吸入一口气。
8. 将吸入器从双唇间取出并屏住呼吸至少五秒钟,然后慢慢的呼出气。

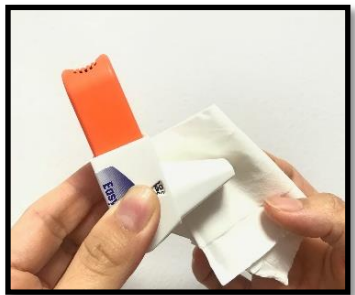

9. 如果还需服多一剂,重复第二到第八步骤。
10. 使用完后,先用纸巾将吸入器的尖端擦干净再盖回保护盖。

## 附加说明

- 使用完后,用清水漱口以避免口腔霉菌感染。
- 如果不小心按Easyhaler®超过一次,需将吸入器的尖端轻轻的在桌上敲打将多余的药剂清除.重复第二到第八步骤。
- 吸入器左侧有剂量计算表,让您知道所剩剂量次数。若只剩二十剂,计算表会出现红色。若计算表出现“0”,这代表吸入器里没有剂量,您该更换新的Easyhaler®。
- Easyhaler®装在铝箔包装内,一旦打开包装,Easyhaler®的使用期限将缩短至6个月。
- 每周至少一次用干布将吸入器的尖端抹干净。由于里面的粉末对湿气敏感,不要用水清洗吸入器的尖端。

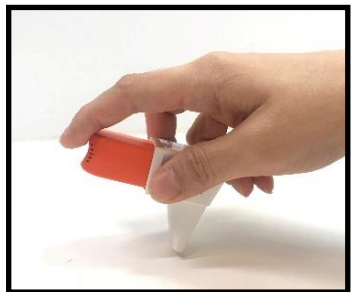

Version 1

Created: 18/06/2018

Produced by Department of Pharmacy (Special thanks to mummy Han Hui & son Rayner)  
KK Women's and Children's Hospital

PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®